


3B. Verzamelen van hoofd- en schaamharen

Tijdens het delict kunnen haren overgedragen worden van zowel de dader als het slachtoffer. Deze overgedragen haren kunnen in het gekamde haar worden aangetroffen. De getrokken en geknipte haren dienen als referentiemonsters. Het trekken van enkele haren is met name voor het vergelijkend haaronderzoek van belang.

Haarset (met opdruk: B. Verzameling van haren),
met daarin:

- Onderzoeksvel
- Stofkam (2x, zie a)
- Envelop (8x)
- Gripzak voor onderzoeksvel

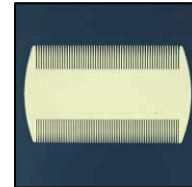

Overige benodigdheden (niet bijgeleverd):

- Pincet
- Schaar

Werkwijze:

- 1) Geef in de onderzoeksrapportage aan of er hoofd- en/of schaamharen worden verzameld. Geef de reden aan indien dit onderdeel niet wordt uitgevoerd.
- 2) Hanteer bij het verzamelen van hoofd- en schaamhaar altijd deze volgorde:
 - kammen
 - trekken
 - knippen

Hoofdhaar:

Kammen

- 3) Leg het onderzoeksvel op een schone ondergrond. Laat het slachtoffer of de verdachte het hoofd voorover buigen boven het onderzoeksvel.
- 4) Kam het haar enkele keren met en tegen de groeirichting in.
Let op: Wanneer een mogelijk spermaspoor in de haren wordt waargenomen dient het haar te worden afgeknipt en apart in een envelop voorzien van SIN label en beschrijving te worden verpakt. Er zijn hiervoor 2 extra enveloppen bijgesloten in de haarset.
- 5) Verpak de uitgekamde haren samen met de kam in een envelop. Voorzie de envelop van een SIN label en geef het haartype en de bemonsteringsmethode aan op de buitenzijde.

Trekken

- 6) Trek, met een schone pincet, in totaal ongeveer 25 haren van verschillende locaties op het hoofd: voor- en achterzijde van het hoofd, kruin, nek en slapen.
- 7) Verpak de getrokken haren in een envelop, voorzie deze van een SIN label en geef het haartype en de bemonsteringsmethode aan op de buitenzijde van de envelop.

Knippen

- 8) Knip, met een schone schaar, in totaal ongeveer 100 haren van verschillende locaties op het hoofd: voor- en achterzijde van het hoofd, kruin, nek en slapen. Knip zo dicht mogelijk op de huid.
- 9) Verpak de geknipte haren in een envelop, voorzie deze van een SIN label en geef het haartype en de bemonsteringsmethode aan op de buitenzijde van de envelop.
- 10) Vouw het onderzoeksvel naar binnen toe op, verpak het in de bijgeleverde gripzak en voorzie deze van een SIN label.

Schaamhaar:

Kammen

- 11) Let het onderzoekslaken/onderzoeksveld op een schone ondergrond.
- 12) Laat het slachtoffer of de verdachte tijdens het onderzoek op een onderzoekslaken of onderlegger zitten of liggen.
- 13) Kam de gehele schaamstreek enkele malen goed.
Let op: Wanneer een mogelijk spermaspoor in de haren wordt waargenomen dient het haar te worden afgeknipt en apart in een envelop voorzien van SIN label en beschrijving te worden verpakt. Er zijn hiervoor 2 extra enveloppen bijgesloten in de haarset.
- 14) Verpak de uitgekamde haren samen met de kam in een envelop. Voorzie de envelop van een SIN label en geef het haartype en de bemonsteringsmethode aan op de buitenzijde.

Trekken

- 15) Trek, met een schone pincet, in totaal ongeveer 10 haren van verschillende locaties in en rond de schaamstreek, inclusief de anus, bovenbenen en de onderbuik.
- 16) Verpak de getrokken haren in een envelop, voorzie deze van een SIN label en geef het haartype en de bemonsteringsmethode aan op de buitenzijde van de envelop.

Knippen

- 17) Knip, met een schone schaar, in totaal ongeveer 50 haren van verschillende locaties in en rond de schaamstreek, inclusief de anus, bovenbenen en de onderbuik. Knip de haren zo dicht mogelijk op de huid af.
- 18) Verpak de geknipte haren in een envelop, voorzie deze van een SIN label en geef het haartype en de bemonsteringsmethode aan op de buitenzijde van de envelop.

Aanvullende informatie:

De gekamde schaamharen worden onderzocht op overgedragen haren. De gekamde, getrokken en geknipte hoofdhaaren en de geknipte en getrokken schaamharen worden gebruikt als referentieharen. De getrokken haren zijn essentieel voor een vergelijking van de haren van wortel tot haarpunt, daar de wortel ontbreekt bij geknipte haren.

Om een betrouwbaar haaronderzoek mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er voldoende getrokken en gekamde hoofd- en/of schaamharen worden genomen. Vanwege de variëteit in morfologische haarkenmerken binnen 1 persoon dienen deze haren van verschillende locaties op het hoofd en in de schaamstreek afkomstig te zijn.